

SEAPOSELEF (シーポスエレフ) 取扱説明書

1. 設置方法

- シーポスエレフ ブルー / 品番:MSPEBL
- シーポスエレフ オレンジ / 品番:MSPEOR

1) クッションを置きます。

※シーポスとセットでご使用ください。

車いすの座面上にクッション (シーポス、シーポスJr) を置いてください。
※高さが高い方が前になります。


クッション (シーポス、シーポスJr)

車いすの背もたれ部分にシーポスエレフを置いてください。
※ベルトがついている方が上になります。


クッション (シーポスエレフ)

2) 車いすに固定します。

ベルトをループに通し、バックルを止めます。
ベルトを引っ張りしっかりと固定します。

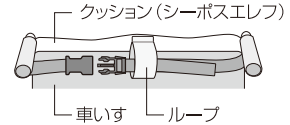

腰を掛けた後に、腰部のパッドを腰にあて位置を調整します。
※腰幅が広く腰パッドが必要ない時には、中身を取り出して腰部のカバーを裏側のポケットに収納します。
取り出した中身は、なくさないよう大切に保管してください。

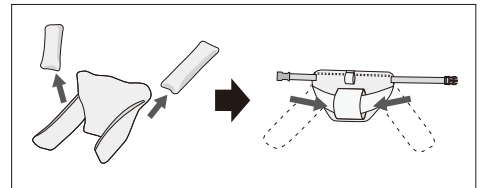

2. お手入れの方法

■ 洗 浄 ■

・カバー




- カバーを取り外し洗濯をしてください。(家庭用洗剤をご使用ください。)
- 漂白剤・柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- 他の洗濯物と一緒に洗濯しないでください。色移りの原因になります。
- ドライクリーニングはしないでください。

・クッション本体

- 水またはお湯を染み込ませた布で汚れた部分を拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は水またはお湯で薄めた家庭用中性洗剤を使用してください。
(強塩酸系の洗浄剤や漂白剤は使用しないでください。)
- クッション本体は洗濯機を使用しないでください。内部に水が浸入し、カビ等が発生する原因になります。

■ 消 毒 ■

- 消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。
※消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
原液のまま使用するとクッション表面が劣化する恐れがあります。
※有機溶剤(シンナー、ベンジン等)は使用しないでください。
- 消毒装置を使用する場合は温度80℃以下、2時間以内の設定にしてください。

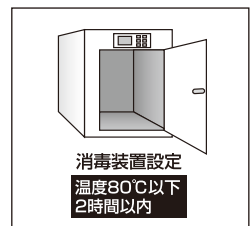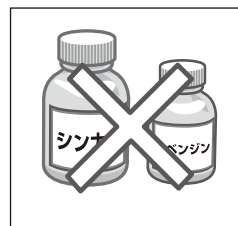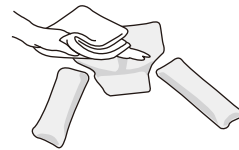

3. 使用上の注意



保管について

- 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- クッションを折りたたまないでください。変形・破損の原因となります。

仕 様

- シーポスエレフ ●サイズ: 高さ42cm×幅30cm×厚さ10cm
(幅はセンタークッション幅)
- 重 量: 0.7kg
 - 素 材: カバー表面=ポリエステル100%
カバー裏面=アクリル (滑り止め加工)
クッション材=ウレタンスチック
クッション表皮=ウレタンフィルム
 - カラー: ブルー/オレンジ

開発・製造元



※健康用品事業本部にて取得しています。

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 名古屋 大阪 広島 福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

FAX 0120-769-123

E-mail: health@molten.co.jp